



medi

Discover
you're
perfect!

Descubra la
variedad

y las novedades en las prendas de
punto redondo y plano de mediven®

medi. I feel better.



Discover
you're
perfect!

Dos nuevos
colores de moda
a partir de la pági-
na 6

“Discover you're perfect”: con mediven los clientes pueden ser ellos mismos, ser auténticos y tener las riendas de su terapia.

Estamos convencidos de que cada individuo es perfecto tal como es. Por eso, en nuestra nueva campaña, mostramos la verdadera gama de prendas de mediven con pacientes reales y con su propia perfección.

Exprésese libremente en la terapia de compresión con el ajuste perfecto.

Juntos, ayudamos a los pacientes a expresar su propia personalidad e incluso a reinventarse a través de la terapia de compresión, día tras día.

Las combinaciones de colores y patrones personalizados de Mediven ofrecen a los pacientes la gama de opciones que se merecen.

Novedad: disfrute de cada paso en su camino con los dos nuevos colores de tendencia y los tres nuevos motivos de cristales.


Ayude a sus clientes a encontrar con mediven su propio ajuste perfecto.

Para prendas de punto plano: cuatro modelos en dos versiones a partir de la página 12

Tres nuevos motivos de cristales a partir de la página 4

New!

Tres nuevos motivos de
cristales

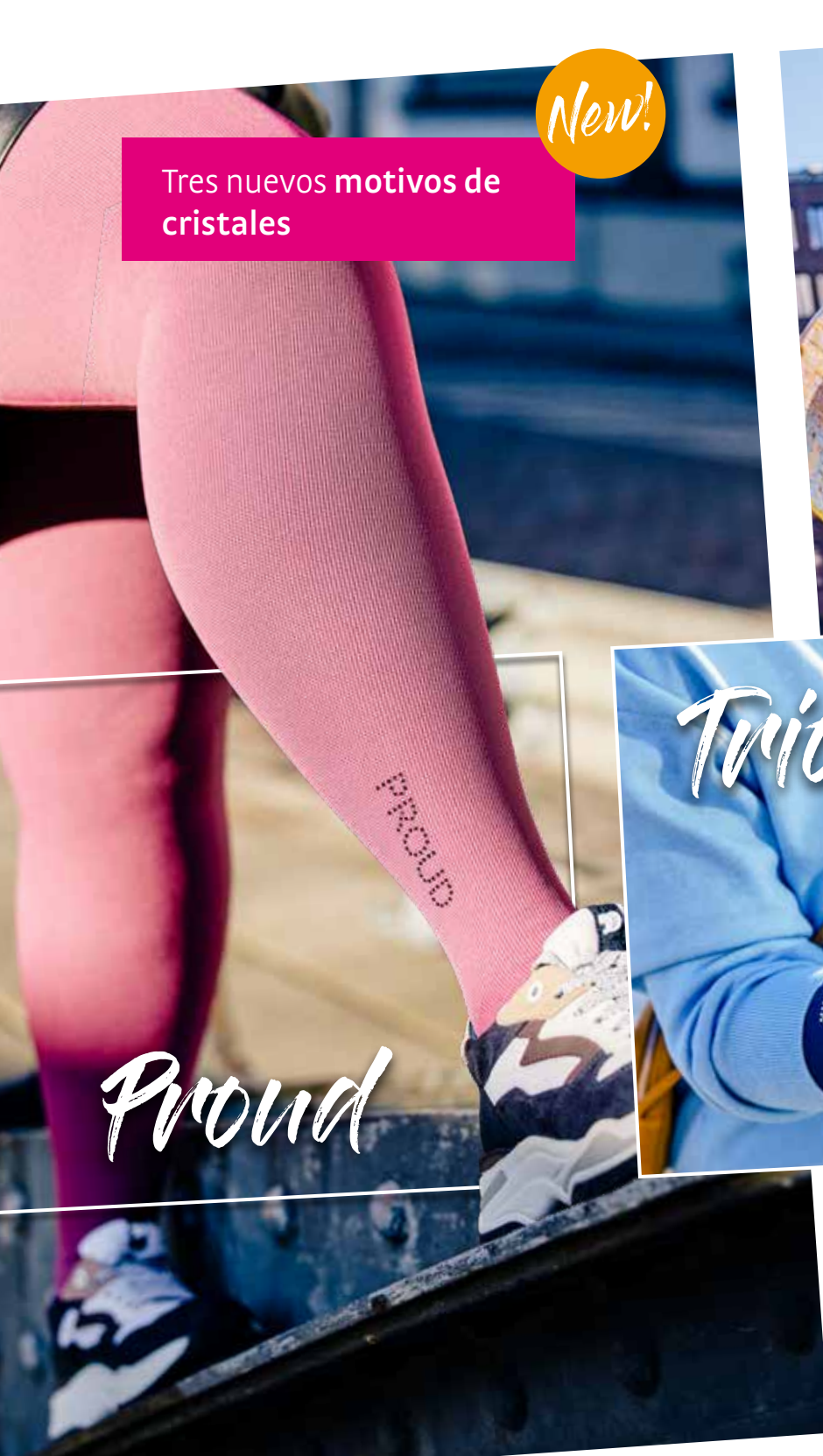

Proud



Trio





Tres nuevos motivos de cristales, un universo de nuevas combinaciones con medi

Con los tres nuevos motivos de cristales, sus pacientes podrán disfrutar de más brillo: El "Trio" plateado, el "Proud" antracita o el motivo "Wind" dorado son perfectos para vestir de forma elegante o deportiva.

Son el accesorio perfecto para los colores estándar y de tendencia de mediven, y para las prendas de brazo y pierna de mediven tanto de punto plano como de punto redondo.

Wind





Se ofrecen dos nuevos colores de tendencia para todos los tejidos de punto redondo y plano de mediven®



New!

El rojo frambuesa
cálido y el castaño
atemporal

Raspberry-red

Chestnut

La verdadera variedad de medi: todos los colores de tendencia están disponibles para los tejidos de punto redondo y plano de mediven®



Mango-yellow

Grey



Están disponibles los
colores de tendencia
gris y amarillo
mango.



Colores estándar
mediven® de eficacia
probada

Cada paciente es único y, para algunos, la perfección implica pasar desapercibido. Esto es justo lo que ofrecen los colores estándar de mediven.



La paleta de colores

mediven®

Elija con sus clientes el producto de la amplia variedad de colores.

Los colores de moda mediven pueden combinarse sin problemas con los estampados más elegantes y los motivos de cristales, lo que resulta perfecto para todo el mundo y para cualquier situación.

Colores de moda

Amarillo mango

Color estándar

Antracita

Color estándar

Cachemira

New!

Colores de moda

Rojo frambuesa

New!

Colores de moda

Castaño

Color estándar

Tierra

Color estándar

Caramelo

Color estándar

Azul marino

Colores de moda

medi Magenta

Colores de moda

Gris

Color estándar

Negro



Elemento de diseño

Classic


Elemento de moda



Elemento de diseño

Dots

Elemento de moda

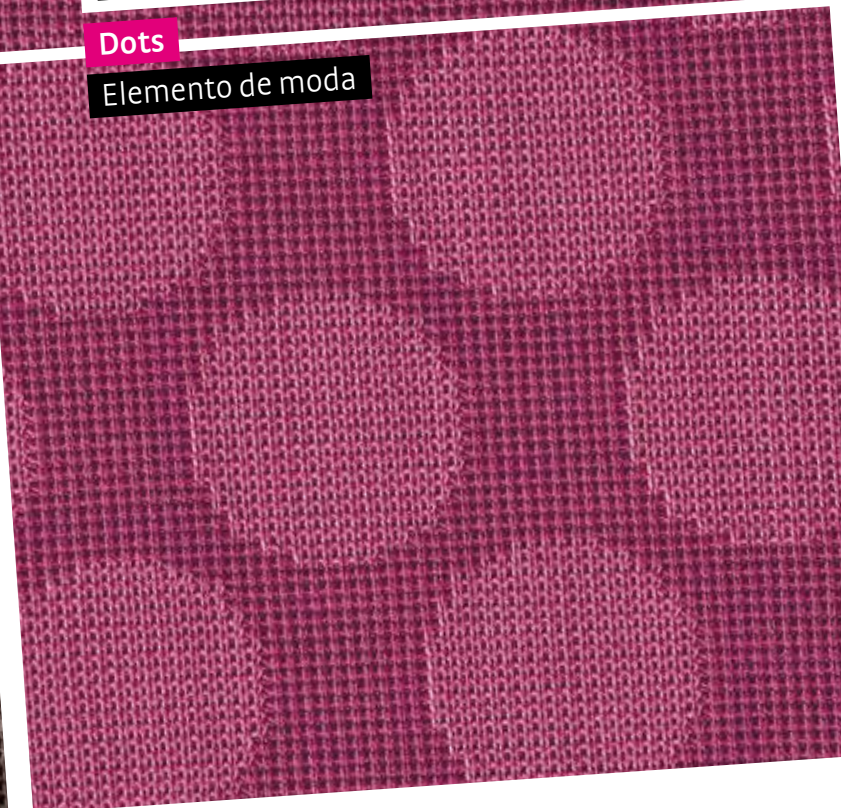

Cuatro patrones

in two versions

Elemento de diseño

Stripes

Elemento de moda

mediven ofrece cuatro patrones de tendencia en prendas para brazos y piernas de punto plano, tanto en los colores estándar como de moda.

¿Sutil o llamativo? Los cuatro patrones están disponibles como elementos de diseño (en un solo tono) y elementos de moda (dos tonos).

Elemento de diseño

Nature

Elemento de moda



Caro lleva mediven 550 en color rojo frambuesa con el elemento de moda Stripes

Stripes



Jürgen lleva mediven 550 en color castaño con el elemento de moda Dots

Nature



Tanya lleva mediven cosy en amarillo mango con elemento de moda Nature

Nicole lleva mediven 550 leg en color gris con el elemento de moda Classic y mediven 550 arm en color amarillo mango



Gama de colores de mediven®

Colores estándar	Punto redondo							Punto plano				
	mediven elegance	mediven comfort	mediven plus	mediven forte	mediven for men	mediven active	mediven angio	mediven mondi	mediven cosy	mediven 550 leg	mediven esprit	mediven 550 arm
Negro	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Antracita	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
Azul marino	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
Cachemira	●	●	●	●				●	●	●	●	●
Caramelo	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●
Tierra								●	●	●	●	●
Rosado	●	○	●	○								
Bronce	●	○	●	○								
Beige	●	○	●	○								
Blanco	○		○			●						
Marrón					●	●						

También se puede solicitar como póster en el medi Customer Centre.

Colores de moda*


medi Magenta	●		●					●	●	●	●	●
Castaño NUEVO	●	●	●	●				●	●	●	●	●
Gris	●	●	●	●				●	●	●	●	●
Amarillo mango	●	●	●	●				●	●	●	●	●
Rojo frambuesa NUEVO	●	●	●	●				●	●	●	●	●

○ Color estándar con un plazo de entrega de hasta 10 días laborables.

* Color de moda con un plazo de entrega de hasta 10 días laborables. Sin posibilidad de devolución.

Motivos de cristales brillantes

Disponibles para mediven elegance, mediven comfort, mediven plus, mediven forte y para todas las prendas mediven leg y arm de punto plano.

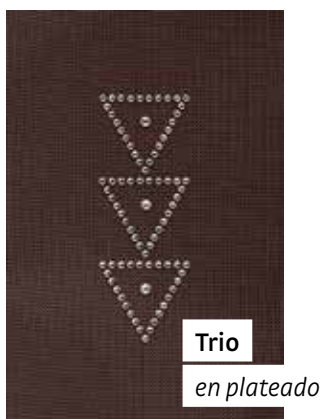

Servicios potentes para usted




Utilice el buscador de colores y patrones para mostrar a sus clientes la variedad exclusiva de punto plano de mediven durante las reuniones de ventas.

Pruébalo ahora en:

www.medi.biz/style

Patrones para prendas de punto plano

Los patrones se pueden combinar con todos los colores de moda y estándar y están disponibles como elementos de diseño (en un solo tono) y elementos de moda (dos tonos). Disponible para las prendas mediven 550 leg y arm, y mediven esprit.

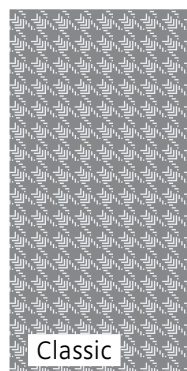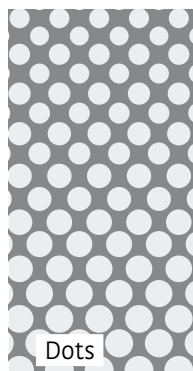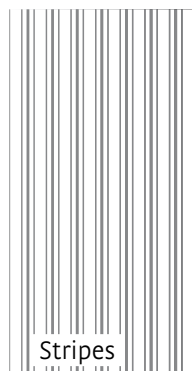

Pueden producirse divergencias en los colores y los patrones derivadas de la impresión.

Uso previsto

Medias de compresión de punto redondo que se emplean para la compresión de las extremidades inferiores, principalmente para el tratamiento de trastornos del sistema venoso.

Medias de compresión médicas de punto plano que se emplean para la compresión de las extremidades inferiores, principalmente para el tratamiento de trastornos del sistema linfático.

Medias de compresión médicas de punto plano que se emplean para la compresión de las extremidades superiores, principalmente para el tratamiento de trastornos del sistema venoso y linfático.



*Discover
you're
perfect!*





Información de producto: comparación entre el punto plano y el redondo


¿Quiénes necesitan las medias de compresión médicas de punto plano?

Las medias de compresión médicas de punto plano se emplean principalmente en la terapia de lipoedema y linfedema.

Sus propiedades especiales se obtienen gracias al resistente material: la alta estabilidad de la pared hace que sean menos elásticas que las medias de punto redondo.

¿Cómo funcionan las medias de compresión médicas?

Las medias de compresión médicas cuentan con una distribución precisa de la presión en la pierna: es mayor en el tobillo y aumenta a medida que sube por la pierna. Las medias de compresión médicas ofrecen una efectividad plena si se ajustan como una segunda piel. El personal con formación de los distribuidores médicos especializados medirá o escaneará el perímetro de la pierna de su cliente para crear una prenda a medida.

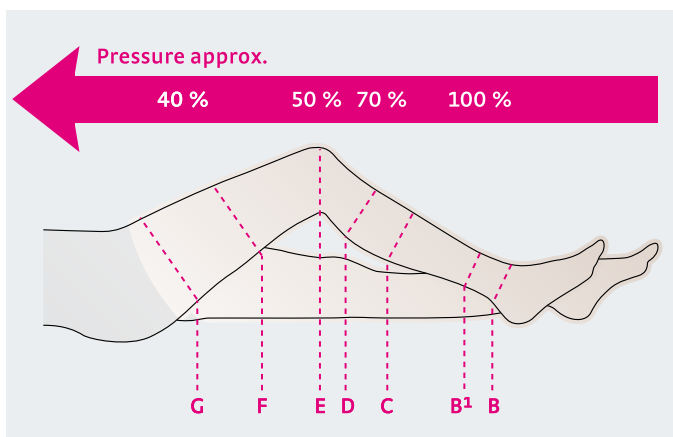

¿Cuál es la diferencia entre la presión en reposo y la presión de trabajo?

La presión en reposo y de trabajo se ejercen sobre el tejido. La presión en reposo es la que ejercen de forma continua las medias de compresión cuando los músculos no están tensos, durante el reposo. La presión de trabajo es la que se ejerce en movimiento, es decir, durante una tensión temporal del músculo, por la resistencia del material de la media de compresión médica, por ejemplo al correr.

¿Las medias de compresión con un material más fuerte tienen una clase de compresión superior?

El material no influye en la clase de compresión ni en la presión en reposo. Por eso, las medias de compresión médicas fabricadas con un tejido de punto fuerte y fino se ofrecen en todas las clases de compresión: La presión en reposo es siempre la misma en una clase de compresión, independientemente del material.

No obstante, la presión de las medias de compresión médicas aumenta brevemente cuando se usan al hacer ejercicio. Esta es la presión de trabajo. Depende de la fuerza y la estabilidad del material: cuanto más fuerte sea el material de las medias de compresión médicas, mayor será la presión de trabajo.

Diferencias	Medias de compresión médicas de punto redondo	Medias de compresión médicas de punto plano
Costura	sin costura	con costura
Tejido de punto	Punto en cilindro redondo	Punto en líneas planas
		
Número de puntadas	consistente	variable
Forma	Forma por el tamaño variable de la puntada y la tensión previa del hilo de la trama	Forma por el número variable de puntadas, hilo de trama insertado
Elasticidad	alta	baja
Presión de trabajo	baja	alta

Sede central
medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
95448 Bayreuth
Alemania
T +49 921 912-0
F +49 921 912-781
export@medi.de
www.medi.de/en



0098320/08.2022